


Sibelmed®

+35
años
years

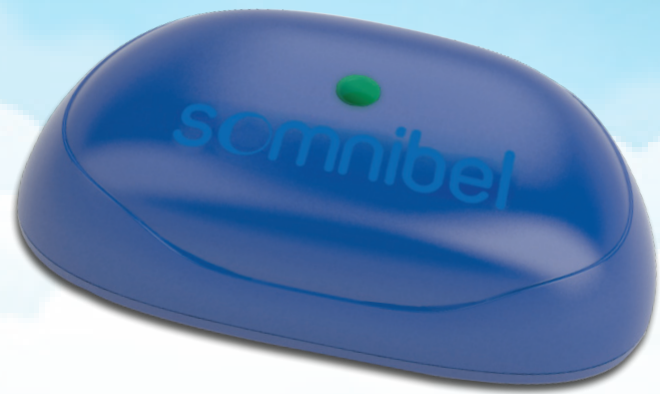

*Tu solución para las apneas y
ronquidos posicionales*

Positional Therapy •
Somnibel®

USB

CE0197

Clase IIa

www.sibelmed.com



somnibel · dispositivo postural

Qué es Somnibel

Somnibel es un equipo médico de Clase IIa, que **reduce la incidencia de apneas del sueño y/o ronquidos posicionales**.

Consiste en un pequeño y ligero dispositivo adherido a la frente que aplica una suave vibración mientras tu paciente duerme en supino para inducirle a cambiar de posición, reduciendo así la incidencia de eventos respiratorios del sueño, ya sean apneas o ronquidos posicionales.

Numerosos estudios clínicos consideran la terapia postural como una solución efectiva para el SAHS posicional, obteniendo unos resultados similares al tratamiento con CPAP.

Somnibel ha sido desarrollado por **SIBELMED** con la colaboración de las unidades de sueño del **Hospital Universitario Araba/Osakidetza** (Vitoria, ESPAÑA) y del **Hospital Universitario Arnau de Vilanova** (Lleida, ESPAÑA).

En España existen entre 5 y 7 millones de personas que sufren apneas del sueño.

Duran-Cantolla
Arch Bronconeumol 2005

Se estima que el 56% de pacientes con SAHS son posicionales.

Oksenberg Chest 1997
Richard Eur Arch Otorhinolaryngol 2006

El 35% de la población adulta es roncadora, de los cuales el 75 % de roncadores simples son posicionales.

Nakano Sleep 2003



Rápido



Fácil



Sin necesidad de ajustarse



Sueño reparador

Beneficios

Somnibel representa un gran avance en el confort para los pacientes con SAHS posicional.

- Es cómodo, silencioso e indoloro.
- Sin período de adaptación.
- No afecta a la estructura del sueño ni lo fragmenta.
- Es idóneo para viajar porque es ligero, pequeño y fácil de transportar.
- Es higiénico y no es invasivo.



Reduce el índice de apneas y ronquidos



Aumenta la saturación en sangre



Mejora la hipertensión arterial



Mejora la calidad del sueño y la somnolencia diurna



Mejora la calidad de vida



Mejora el descanso de la pareja



Modelos

Positional Therapy
somnibel®

Uso paciente

Somnibel se dirige a pacientes con SAHS y/o ronquidos posicionales.

Somnibel ha sido diseñado pensando en el paciente. Gracias a su función retardo, el dispositivo se activa a los 15 minutos de que el paciente se tumbe, lo que le ayudará a quedarse dormido. Además, si durante la noche detecta que se ha incorporado, esperará unos minutos antes de aplicar el estímulo para que se pueda quedar dormido de nuevo.

Positional Therapy
somnibelPro®

Uso especialista

SomnibelPro se dirige a unidades de sueño y centros prescriptores.

Realiza una monitorización, evaluación de la eficacia y seguimiento de la terapia.
Su configuración permite registrar, visualizar y analizar las señales a través del software SomniLab.




Software SomniLab

SomniLab es un software intuitivo, desarrollado para la descarga y análisis de las señales registradas por tu dispositivo **SomnibelPro**.


Permite el almacenamiento y la visualización de:

- Posición corporal
- Actigrafía
- Potencia del estímulo

SomniLab te permitirá validar y hacer el seguimiento de tus pacientes fácilmente gracias al análisis del cumplimiento del tratamiento postural. Con él, podrás configurar **SomnibelPro** y adaptarlo a las necesidades de cada uno de tus pacientes. Además, te ofrece opciones de personalización como los tiempos de retardo inicial para conciliar el sueño, el retardo de vibración en supino o de incremento de vibración, así como modificar el modo terapia o placebo para posibles estudios clínicos.

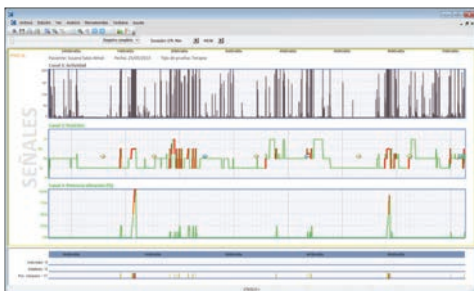

Señales

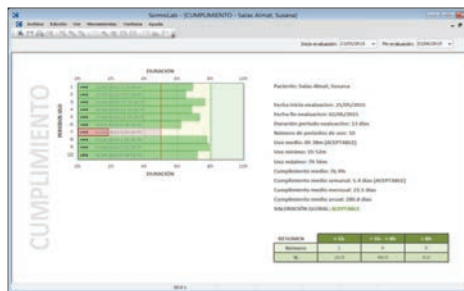

Cumplimiento



Tendencias



somnibel · dispositivo postural

Características principales

	somnibel	somnibelPro
Paciente	>18 años	>40 Kg >145 cm
Dimensiones	52 x 32 x 14 mm.	
Peso	17g.	
Modo de funcionamiento	Modo terapia	
	-	Modo placebo
Señales monitorizadas	Posición corporal	
	-	Actigrafía
	-	Potencia del estímulo
Señales registradas	-	Posición corporal
	-	Actigrafía
	-	Potencia del estímulo
Memoria	-	365 grabaciones
Software	-	SomniLab
Batería	Batería recargable	
Conectividad	USB	
Adhesivos	30 uds.	

somnibel

Cód. 08767*



somnibelPro

Cód. 08768*

*Incluye 1 caja de adhesivos

Adhesivos Somnibel

Cód. 08753



Producto desarrollado por **SIBELMED** en colaboración con



Screen&Go

Polígrafo screening de 1 a 8 canales*



- . Flujo respiratorio
- . SpO₂
- . Pulso (BPM)
- . Ronquido
- . Banda torácica
- . **Posición**

* Actividad y Termopar (opcional)

* Termopar no se puede utilizar simultáneamente con la banda torácica

Sleep&Go

Polígrafo cardiorespiratorio de 8 a 16 canales*



- . Flujo respiratorio
- . SpO₂
- . Pulso (BPM)
- . Ronquido
- . Banda torácica
- . **Posición**
- . Actividad
- . Banda abdominal
- . Termopar
- . Bluetooth
- . Nivel CPAP
- . Mov. Extremidades
- . Onda pulso

* Módulo externo EXG, para pruebas EEG, EMG, EOG, ECG (opcional)

* Ronquido externo no se puede utilizar simultáneamente con el sensor de movimiento

SIBEL S.A.U., Rosellón 500 bajos, 08026 BARCELONA (Spain)
 Ventas Nacionales: Tel. +34 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
 International Sales: Tel. +34 93 436 00 07 e-mail: export@sibelmed.com
 Servicio Técnico: +34 93 433 54 50 e-mail: sat@sibelmed.com Fax: +34 93 436 16 11
 www.sibelmed.com · www.somnibel.eu



ISO9001:2008



Ing. **CARUSO** S.R.L.
 TECNOLOGIA MEDICA

www.ingcaruso.com.ar
 Burela 1957 CABA - Argentina
 Tel.: 0114522-1317 / 0111558556572
 Instagram - Facebook